

# WARTNER®

## CRYO FREEZE WRATTEN EN VOETWRATTEN

Dankzij de carbon freeze technology

### VERRUES COMMUNES ET PLANTAIRES

Grâce à la carbon freeze technology

### WARZEN UND FUßWARZEN

Dank der Carbon-Freeze-Technologie

ALVORENS WARTNER® CRYO FREEZE TE GEBRUIKEN AVANT D'UTILISER WARTNER® CRYO FREEZE VOR DER ANWENDUNG VON WARTNER® CRYO FREEZE




BEKIJK HET INSTRUCTIEFILMPJE REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTION

SEHEN SIE SICH DEN ANWENDUNGSFILM AN

scan de / scannez le / scannen Sie den QR-code / code QR / QR-Code

www.wartner.eu

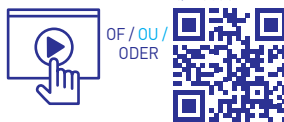

#### 1. VOORBEREIDING / PRÉPARATION / VORBEREITUNG

Voor deze stap uitsluitend voor het eerste gebruik uit. Verwijder de transparante dop niet. Draai het witte gedeelte van de pen één keer volledig rond in de richting van de pijl, totdat u een luide klik hoort. Draai stevig door omdat er kracht nodig is om de binnenste afsluiting te verbreken. **Als deze instructie niet wordt opgevolgd, wordt de pen niet geactiveerd en is hij niet geschikt voor gebruik. Effectuez cette étape pour la première utilisation uniquement. Ne retirez pas le capuchon transparent. Tournez une fois complètement la partie blanche du stylo dans la direction de la flèche jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore. Tournez fermement, il faut faire preuve de force pour briser la protection interne. Si cette instruction n'est pas respectée, le stylo n'est pas activé et pas prêt à être utilisé.**

Führen Sie diesen Schritt nur vor der ersten Anwendung aus. Den transparenten Verschluss nicht entfernen. Den weißen Teil des Stiftes einmal vollständig in Richtung des Pfeils herumdrehen, bis Sie einen lauten Klick hören. Kräftig festziehen, weil Kraft erforderlich ist, um die innerste Sperre zu brechen. Wenn diese Anweisung nicht befolgt wird, wird der Stift nicht aktiviert und ist er nicht für die Anwendung geeignet.



#### 2. ACTIVATIE / ACTIVATION / AKTIVIERUNG

Plaats de pen op een vlakke, stevige ondergrond (bv. tafel) met de transparante dop naar beneden gericht.  
Houd met één hand de transparante dop vast en druk met de andere hand het witte deel van de pen 7 seconden stevig naar beneden. Gebruik een klok als richtlijn. Probeer de 7 seconden activatietijd zo nauwkeurig mogelijk te respecteren. Een witte ijstabelt wordt gevormd.  
Placez le stylo sur une surface plane et solide (p. ex. une table) avec le capuchon transparent vers le bas.  
Tenez le capuchon transparent d'une main et appuyez fermement sur la partie blanche du stylo avec l'autre main pendant 7 secondes. Utilisez une horloge pour évaluer le temps. Essayez de respecter le plus fidèlement possible le temps d'activation de 7 secondes. Une pastille de glace blanche se forme.  
Den Stift auf einen flachen, festen Untergrund (z. B. Tisch) stellen, mit dem transparenten Verschluss nach unten zeigend.  
Mit einer Hand den transparenten Verschluss festhalten und mit der anderen Hand den weißen Teil des Stiftes 7 Sekunden lang kräftig nach unten drücken. Verwenden Sie eine Uhr als Richtlinie. Versuchen Sie, die 7 Sekunden Aktivierungszeit möglichst genau einzuhalten. Es wird eine weiße Eistablette gebildet.

Gebruik de klok als gids. Utilisez l'horloge pour évaluer le temps. Verwenden Sie die Uhr als Leitfaden.



#### 3. CONTROLE / CONTRÔLE / KONTROLLE

Verwijder de transparante dop. / Retirez le capuchon transparent. / Den transparenten Verschluss entfernen.



Als er een witte ijstabelt wordt gevormd op het puntje van de pen, gebruik dan de pen onmiddellijk volgens STAP 4. / Si une pastille de glace blanche se forme à la pointe du stylo, utilisez immédiatement le stylo conformément à l'ÉTAPE 4. / Wenn an der Spitze des Stiftes eine weiße Eistablette gebildet wird, verwenden Sie den Stift unverzüglich gemäß SCHRITT 4.



Als u geen witte ijstabelt ziet of als de tablet eraf is gevallen of vastzit in de transparante dop, plaats dan de transparante dop terug en herhaal STAP 2. / Si vous ne voyez pas de pastille de glace blanche ou si elle est tombée ou coincée dans le bouchon transparent, réinsérez le bouchon transparent et répétez l'ÉTAPE 2. / Wenn Sie keine weiße Eistablette sehen oder wenn die Tablette heruntergefallen ist oder im transparenten Verschluss steckt, bringen Sie den transparenten Verschluss wieder an und wiederholen Sie SCHRITT 2.



#### 4. BEHANDELING / TRAITEMENT / BEHANDLUNG

Druk de ijstabelt stevig tegen de wrat aan. Appuyez fermement la pastille de glace contre la verrue. Drücken Sie die Eistablette kräftig gegen die Warze.

##### 15 SEC. / SEK.


Op dunne huid (handen, vingers, armen, tenen, boven- of zijkant van de voeten enz.) Sur une peau mince (mains, doigts, bras,orteils, partie supérieure ou côté des pieds, etc.) Auf dünner Haut (Hände, Finger, Arme, Zehen, Oberseite oder Seite der Füße usw.)

##### 40 SEC. / SEK.

Op eeltige, dikke huid (voetzolen) Sur une peau calleuse et épaisse (plantas des pieds) Auf schwieliger, dicker Haut (Fußsohlen)

Verkeerd gebruik of een langere contacttijd met de wrat kan resulteren in huid- of zenuw schade. Une mauvaise utilisation ou un contact prolongé avec la verrue peut causer des lésions cutanées ou nerveuses. Eine falsche Anwendung oder eine längere Kontaktzeit mit der Warze kann zu Haut- oder Nervenschäden führen.

Gebruik de klok als gids. Utilisez l'horloge pour évaluer le temps. Verwenden Sie die Uhr als Leitfaden.

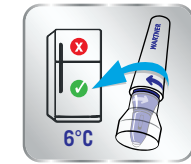

#### NA DE BEHANDELING:

Plaats de transparante dop terug op de pen en zet die in de koelkast in de originele verpakking (incl. bijsluiter). Niet in de diepvries bewaren.

#### APRÈS LE TRAITEMENT:

Remplacez le capuchon transparent sur le stylo et mettez-le au frigo dans son emballage d'origine (avec la notice). Ne pas conserver au congélateur.

#### NACH DER BEHANDLUNG:

Den transparenten Verschluss erneut auf den Stift setzen und in der Originalverpackung in den Kühlschrank stellen (inkl. Packungsbeilage). Nicht im Tiefkühlschrank aufbewahren.

LEES DE VOLLEDIGE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U WARTNER® CRYO FREEZE GEBRUIKT. BEKIJK HET INSTRUCTIEFILMPJE OP WWW.WARTNER.EU.



#### EXTRA OPTIONELE STAP

voor een optimale behandeling en nabehandeling van voetwratten.

Voor de behandeling: Laat de voet eerst 5 minuten weken in warm water en verwijder daarna de eeltige/harde huid met een vijl. Droog grondig af voordat u de behandeling verderzet. Vijl niet inbegrepen.

Na de behandeling: U kan enig ongemak ondervinden wanneer er druk of wrijving ontstaat op de behandelde wratten. Het kan nuttig zijn om het gevoelige gebied te beschermen met een comfortpleister die vrij verkrijgbaar is. Comfortpleister niet inbegrepen.

#### A. WAT U VOOR EN NA DE BEHANDELING MOET WETEN

Gebruik Wartner® Cryo Freeze niet:

- bij kinderen jonger dan 4 jaar.
- op gezicht, lies, geslachtsdelen, hoofdhuid of slijmvlies.
- als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag dan advies aan uw arts of u dit product kunt gebruiken.
- bij diabetici of personen met bloedcirculatie- of bloedstollingsproblemen.
- op wratten die zich op een gevoelige huid of zeer dunne huid bevinden (rond gewrichten).
- als de wrat en/of de omliggende huid bloedt of open, geïrriteerd, jeukend, geïnfecteerd of rood is.
- op een gezonde huid (huid zonder wratten).
- op met vloeistof gevulde blaasjes op de huid (molluscum contagiosum' genoemd of waterwratten) of andere blaasjes of blaren.
- als u niet zeker weet of de huidverdikking een gewone wrat is. Probeer geen moedervlekken, recente vasculaire en onregelmatige huidverdikkingen, of iets dat huidkanker (melanoom) kan zijn, te verwijderen.
- op clusterwratten of wratten die zeer dicht bij elkaar (minder dan 3 cm) liggen. Behandel slechts 1 wrat en wacht 14 dagen voordat u de volgende wrat behandelt. Zo niet is er een verhoogd risico op overmatige huidbeschadiging.

#### NA HET GEBRUIK VAN DE WARTNER® CRYO FREEZE

- Het gebruik van de Wartner® Cryo Freeze zal een tintelend gevoel veroorzaken en de huid kan pijnlijk of geïrriteerd aanvoelen. Maak u geen zorgen, deze effecten zouden na een paar uur moeten verdwijnen.
- De huid zal wit zijn op de plaats waar u Wartner® heeft gebruikt. Na een tijdje zal de huid weer zijn normale kleur krijgen en zal de wrat er rood uitzien.
- Binnen enkele minuten tot enkele dagen na het bevriezen kan er een blaar ontstaan, soms gevuld met

bloed. Dit is een normaal gevolg van het bevriezen en geeft meestal aan dat de behandeling succesvol was. Probeer de wrat niet te doen barsten. Bescherm de blaar indien nodig met een steriel verband. Desinfecteer de blaar goed als ze toch opengaat.

- Als u of uw kind een wrat op de voetloze heeft die pijnlijk is om op te lopen, breng dan een ronde likdoornpleister aan op het gebied - dit maakt het comfortabeler.
  - Niet plukken aan het behandelde gebied of proberen de wrat af te scheuren.
  - Houd het behandelde gebied schoon en desinfecteer indien nodig. Dit is belangrijk om een superinfectie van de behandelde huid te voorkomen.
  - Baden en douchen is toegestaan.
- Mogelijke nevenwerkingen zijn:
- blaren rond het behandelde gebied (mogelijks bloedblaren) - deze zullen van geval tot geval verschillen (zie hoofdstuk 'Na gebruik van Wartner® Cryo Freeze);
  - de huid verliest haar kleur - dit heet 'depigmentatie';
  - kleine brandwonden en littekenvorming;
  - huid-/zenuw schade (in geval van overmatige blootstelling);
  - tijdelijke verstoring van het gevoel in de huid (tintelingen, prikkend, pijnlijk gevoel).

Gelieve elk vermoedelijk ernstig incident met dit product te melden aan ConsumerConnect@perrigo.com en aan het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel. Dit is belangrijk voor de continue beoordeling van de verhouding voordelen/risico's van dit product.

#### PRAAT MET UW DOKTER:

- als u of uw kind onverwachte bijwerkingen ervaart;
- als de wrat niet geneest;
- als de wrat na 3 behandelingen niet verdwenen is (zie hieronder).

#### Moet ik de behandeling herhalen?

Wartner® is zeer efficiënt - na slechts enkele seconden gebruik wordt de kern van de wrat bereikt en vernietigd. Door de natuurlijke vervelling van de huid zal de wrat loslaten. In de meeste gevallen zal de wrat na één behandeling verdwijnen. Oude of grote wratten kunnen meer dan één behandeling nodig hebben, vooral in geval van voetwratten.

- Als de wrat, of een deel ervan, niet verdwijnt na 14 dagen, herhaal dan de behandeling (stap 2, 3 en 4).
- Als u wratten dicht bij elkaar heeft op uw vinger, voet of teen, dan moet u elke wrat alleen behandelen - wacht 14 dagen voordat u uw volgende wrat behandelt.
- Als een wrat na 3 behandelingen niet verdwijnt, praat dan met uw arts. Verget niet om minstens 14 dagen tussen de behandelingen te laten.

Bezoek onze website [www.wartner.eu](http://www.wartner.eu) voor meer informatie over wrattenbehandelingen.

#### B. HOE DE WARTNER® CRYO FREEZE BEWAREN

##### Voor het eerste gebruik:

- Droog en koel (5-25 °C) bewaren.
- Niet in de vriezer bewaren.
- Niet blootstellen aan temperaturen boven de 50 °C. Niet bewaren in auto's, caravans of andere plaatsen waar de temperatuur sterk kan stijgen. Een stijging van de temperatuur beschadigt de pen en schakelt deze permanent uit.
- Beschermen tegen de zon. Verwijder houden van vuur en hitte.

##### Na het eerste gebruik:

- Plaats de dop terug op de pen en bewaar hem in de koelkast - dit geeft de pen een langere levensduur en verhoogt het aantal nuttige doses. Niet in de vriezer

bewaren.

- Stel het geactiveerde apparaat niet bloot aan temperaturen boven 35 °C, omdat dit een veiligheidsvoorziening activeert die de pen permanent uitschakelt.
- Als u de plastic onderdelen van de pen of de dop wilt reinigen, gebruik dan alleen een vochtige doek.

#### C. BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

##### Veiligheidsmaatregelen

Niet langer dan 15 seconden aanbrengen op een dunne huid (handen, vingers, armen, tenen, boven- en zijkant van de voeten enz.) en 40 sec. op de eeltige, dikke huid (voetzolen).

- Alleen voor uitwendig gebruik.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.
- De behandeling van wratten bij kinderen moet gebeuren door een volwassene.
- Niet inademen.
- CO<sub>2</sub> is een geurloos, niet giftig en onontvlambaar gas.
- Houder onder druk. Kan barsten bij verwarming. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden - de pen staat onder hoge druk en kan niet worden geopend.

##### Verpakking en vervaldatum

- De verpakking bevat één Wartner® Cryo Freeze-verpakking.
- Houdbaarheid in de koelkast na eerste gebruik: 2 maanden.
- Gebruik de pen niet meer na de vervaldatum op de verpakking.
- Gooi de pen weg volgens de plaatselijke voorschriften voor afvalverwijdering.

##### WAT TE DOEN ALS DE PEN LEEG OF GEBROKEN IS:

- Als u geen ijstabelt ziet na het voorbereiden en activeren van de pen (stap 1 & 2), is het gas in de pen op. Gebruik een nieuwe pen.
- Als er een continu gesis klinkt nadat u de Wartner®

Cryo Freeze hebt geactiveerd en er ontsnapt gas, dan is de pen kapot. Probeer de pen niet te openen of zelf te repareren - zelfs als u denkt dat hij leeg is. Breng de pen terug naar uw apotheek.



Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in november 2019.

Oystershell NV  
Nijverheidsweg 10  
9820 Merelbeke  
België

Verdeler/Distributeur/Vertrieb:  
Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26,  
9810 Nazareth, België



5°C - 25°C

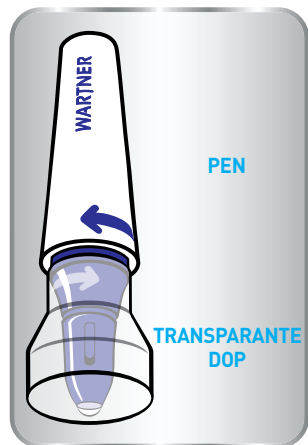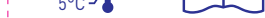

Brand:	Application:	Item code(s):	Market:	Master text version:	Barcode 1 type:	-	Component size (flat):	Cutter guide nr.	Manufacturer:							
Wartner	Pen	LF24591A	Belgium	-	Barcode 1 nr:	-	-	-	-							
Variant:	Size:	Unit of measurement:	Languages on the component:	Packaging type:	Barcode 2 type:	-	Folded size:	PO nr:	Printer:							
Wart&Verruca Cryo	14	ml	dutch-French-German	leaflet	Barcode 2 nr:	-	-	LRO1652	-							
	1: Cyan				5: PANTONE Reflex Blue C	Marketing Approval: Name: ..... Date: ... / ... / ... Signature:	Regulatory Approval: Name: ..... Date: ... / ... / ... Signature:		www.athena-graphics.be							
	2: Magenta				6: Cutter guide											
	3: Yellow				7:											
	4: Black				8:											
Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Athena reference nr.:
0	15-01-2020	1	28-01-2020	2	06-04-2020	3	-	4	-	5	-	6	-	7	-	871462-002
FOR APPROVAL - Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.																

1686/020015/19K/LF24591A Δ1911

LISEZ LE MODE D'EMPLOI COMPLET AVANT D'UTILISER WARTNER® CRYO FREEZE. REGARDEZ LA VIDÉO D'INSTRUCTION SUR WWW.WARTNER.EU.




### ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE EN OPTION

pour un (post-)traitement optimal des verrues plantaires.

**Avant le traitement:** Laissez tremper le pied dans de l'eau tiède pendant 5 minutes, puis retirez la peau calleuse/dure avec une lime. Séchez bien avant de poursuivre le traitement. Lime non comprise.

**Après le traitement:** Vous pouvez ressentir un certain inconfort lorsqu'il y a pression ou friction sur les verrues traitées. Il peut être utile de protéger la zone sensible avec un sparadrap confort, disponible dans de nombreux points de vente. Sparadrap confort non inclus.

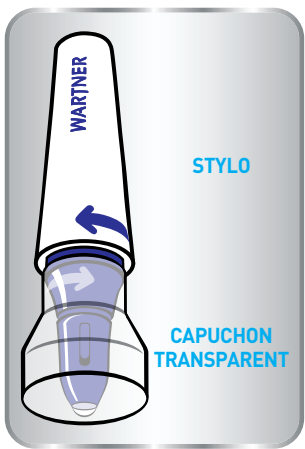

STYLO

CAPUCHON TRANSPARENT

LESEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE GEBRAUCHSANWEISUNG, BEVOR SIE WARTNER® CRYO FREEZE VERWENDEN. SEHEN SIE SICH DEN ANWENDUNGSFILM AUF WWW.WARTNER.EU AN.




### ZUSÄTZLICHER OPTIONALER SCHRITT

für eine optimale Behandlung und Nachbehandlung von Fußwarzen.

**Vor der Behandlung:** Lassen Sie den Fuß zuerst 5 Minuten in warmem Wasser einweichen und entfernen Sie danach mit einer Feile die schwielige/harte Haut. Gründlich abtrocknen, bevor Sie die Behandlung fortsetzen. Feile nicht inbegriffen.

**Nach der Behandlung:** Bei Druck oder Reibung auf den behandelten Warzen kann ein leicht unangenehmes Gefühl auftreten. Es kann sinnvoll sein, das empfindliche Gebiet mit einem Komfortpflaster zu schützen, das allgemein erhältlich ist. Komfortpflaster nicht inbegriffen.

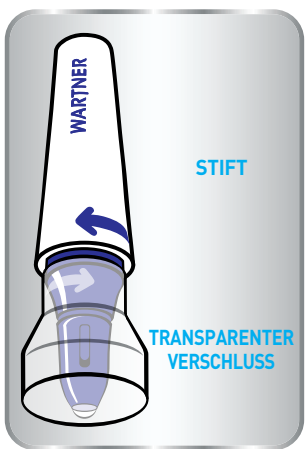

STIFT

TRANSPARENTER VERSCHLUSS

### A. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT ET APRÈS LE TRAITEMENT

Ne pas utiliser Wartner® Cryo Freeze:

- pour les enfants de moins de 4 ans;
  - sur le visage, l'aine, les organes génitaux, le cuir chevelu ou les muqueuses;
  - si vous êtes enceinte ou allaitez votre enfant. Demandez alors conseil à votre médecin pour savoir si vous pouvez utiliser ce produit.
  - pour les diabétiques ou les personnes souffrant de problèmes de circulation sanguine ou de coagulation.
  - sur les verrues qui se trouvent sur une peau délicate ou très fine (autour des articulations).
  - si la verrue et/ou la peau environnante saigne ou est ouverte, irritée, infectée, rouge ou sujette aux démangeaisons.
  - sur une peau saine (peau sans verrues).
  - sur des papules remplies de liquide sur la peau («molluscum contagiosum») ou autres ampoules.
  - si vous n'êtes pas sûr(e) qu'il s'agit d'une verrue. N'essayez pas d'enlever des points de beauté, de récentes protubérances vasculaires et irrégulières de la peau, ou quoi que ce soit qui pourrait être un cancer de la peau (mélanome).
  - sur des groupes de verrues ou des verrues très rapprochées (moins de 3 cm). Traitez une seule verrue et attendez 14 jours avant de traiter la verrue suivante. Sinon, il existe un risque accru de dommages cutanés excessifs.
- APRÈS L'UTILISATION DE WARTNER® CRYO FREEZE**
- L'utilisation de Wartner® Cryo Freeze provoque une sensation de picotement et la peau peut être douloureuse ou irritée. Ne vous inquiétez pas, ces effets devraient disparaître après quelques heures.
  - La peau sera blanche à l'endroit où vous avez utilisé Wartner®. Après un certain temps, la peau reprendra sa couleur normale et la verrue sera rouge.

• si la verrue ne guérit pas;

- si la verrue n'a pas disparu après 3 traitements (voir ci-dessous).

**Dois-je répéter le traitement?**

Wartner® est très efficace - après seulement quelques secondes d'utilisation, le cœur de la verrue est atteint et détruit. La verrue sera éliminée grâce à la desquamation naturelle de la peau. Dans la plupart des cas, la verrue disparaîtra après un seul traitement. Les verrues plus anciennes ou de grande taille peuvent nécessiter plus d'un traitement, surtout dans le cas de verrues plantaires.

- Si la verrue, ou une partie de celle-ci, ne disparaît pas après 14 jours, répétez le traitement (étapes 2, 3 et 4).
- Si vous avez des verrues rapprochées au doigt, au pied ou à l'orteil, vous devriez traiter chaque verrue séparément et attendre 14 jours avant de traiter la verrue suivante.
- Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, parlez-en à votre médecin. N'oubliez pas de laisser au moins 14 jours entre les traitements.

**Les effets secondaires possibles sont:**

- ampoules autour de la zone traitée (ampoules ou hématomes sous-cutanés possibles) - cela varie d'un cas à l'autre (voir chapitre «Après l'utilisation de Wartner® Cryo Freeze»);
- la peau perd sa couleur - c'est ce que l'on appelle la «dépigmentation»;
- petites brûlures et cicatrices;
- lésions cutanées/nerveuses (en cas de surexposition);
- troubles temporaires au toucher au niveau de la peau (fourmillements, sensation douloureuse de picotement).

Tout incident grave survenu en lien avec ce produit doit être signalé au ConsumerConnect@perrigo.com et à l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé, Eurostation II, place Victor Horta 40/40, 1060 Bruxelles. C'est important pour l'évaluation continue du rapport avantages/risques de ce produit.

**PARLEZ À VOTRE MÉDECIN:**

- si vous ou votre enfant éprouvez des effets secondaires inattendus;

### B. COMMENT CONSERVER WARTNER® CRYO FREEZE

**Avant la première utilisation:**

- Conservez-le dans un endroit sec et frais (5-25 °C).
- Ne pas conserver au congélateur.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C.
- Ne pas placer dans une voiture, une caravane ou autres endroits où la température peut augmenter fortement. Une augmentation de la température endommagera le stylo, qui sera alors définitivement inutilisable.
- Protéger des rayons du soleil. Tenir à l'écart du feu et de la chaleur.

**Rendez-vous sur notre site Internet**

[www.wartner.eu](http://www.wartner.eu) pour plus d'informations sur les traitements des verrues.

**Après le traitement:**

- Si la verrue ne guérit pas;
- si la verrue n'a pas disparu après 3 traitements (voir ci-dessous).

**Dois-je répéter le traitement?**

Wartner® est très efficace - après seulement quelques secondes d'utilisation, le cœur de la verrue est atteint et détruit. La verrue sera éliminée grâce à la desquamation naturelle de la peau. Dans la plupart des cas, la verrue disparaîtra après un seul traitement. Les verrues plus anciennes ou de grande taille peuvent nécessiter plus d'un traitement, surtout dans le cas de verrues plantaires.

- Si la verrue, ou une partie de celle-ci, ne disparaît pas après 14 jours, répétez le traitement (étapes 2, 3 et 4).
- Si vous avez des verrues rapprochées au doigt, au pied ou à l'orteil, vous devriez traiter chaque verrue séparément et attendre 14 jours avant de traiter la verrue suivante.
- Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, parlez-en à votre médecin. N'oubliez pas de laisser au moins 14 jours entre les traitements.

### C. INFORMATIONS IMPORTANTES POUR L'UTILISATEUR

**Mesures de sécurité**

**Ne pas appliquer plus de 15 secondes sur une peau mince (mains, doigts, bras, orteils, partie supérieure et côté des pieds, etc.) et 40 secondes sur une peau calleuse et épaisse (plantes des pieds).**

- Usage externe uniquement.
- À conserver hors de portée des enfants.
- Le traitement des verrues chez les enfants doit être effectué par un adulte.
- Ne pas respirer le produit.
- Le CO<sub>2</sub> est un gaz inodore, non toxique et ininflammable.
- **Support sous pression. Peut se fendre sous l'effet de la chaleur. Ne pas percer ou brûler même après utilisation** - le stylo est sous haute pression et ne peut pas être ouvert.

**Emballage et date de péremption**

- Le conditionnement contient un emballage Wartner® Cryo Freeze.
- Durée de conservation au réfrigérateur après la première utilisation: 2 mois.
- N'utilisez plus le stylo après la date de péremption présente sur l'emballage.
- Jetez le stylo conformément à la réglementation locale sur l'élimination des déchets.

**Après le traitement:**

- Si la verrue ne guérit pas;
- si la verrue n'a pas disparu après 3 traitements (voir ci-dessous).

**Dois-je répéter le traitement?**

Wartner® est très efficace - après seulement quelques secondes d'utilisation, le cœur de la verrue est atteint et détruit. La verrue sera éliminée grâce à la desquamation naturelle de la peau. Dans la plupart des cas, la verrue disparaîtra après un seul traitement. Les verrues plus anciennes ou de grande taille peuvent nécessiter plus d'un traitement, surtout dans le cas de verrues plantaires.

- Si la verrue, ou une partie de celle-ci, ne disparaît pas après 14 jours, répétez le traitement (étapes 2, 3 et 4).
- Si vous avez des verrues rapprochées au doigt, au pied ou à l'orteil, vous devriez traiter chaque verrue séparément et attendre 14 jours avant de traiter la verrue suivante.
- Si une verrue ne disparaît pas après 3 traitements, parlez-en à votre médecin. N'oubliez pas de laisser au moins 14 jours entre les traitements.

### A. WAS SIE VOR UND NACH DER BEHANDLUNG WISSEN MÜSSEN

Verwenden Sie Wartner® Cryo Freeze nicht:

- Bei Kindern unter 4 Jahren.
  - Im Gesicht, an der Leiste, auf den Genitalien, der Kopfhaut oder auf Schleimhäuten.
  - Wenn Sie schwanger sind oder stillen. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat, ob sie dieses Produkt verwenden können.
  - Bei Diabetikern oder Personen mit Durchblutungs- oder Blutgerinnungsproblemen.
  - Bei Warzen, die sich auf empfindlicher Haut oder sehr dünner Haut befinden (in der Umgebung von Gelenken).
  - Wenn die Warze und/oder die umliegende Haut blutet oder offen, irritiert, juckend, infiziert oder rot ist.
  - Bei einer gesunden Haut (Haut ohne Warzen).
  - Auf mit Flüssigkeit gefüllten Bläschen auf der Haut („Molluscum contagiosum“ oder Wasserwarzen genannt) oder sonstige Bläschen oder Blasen.
  - Wenn Sie nicht sicher wissen, ob die Hautverdickung eine gewöhnliche Warze ist. Versuchen Sie nicht, Muttermale, neu entstandene vasculäre und unregelmäßige Hautverdickungen oder etwas, das Hautkrebs (Melanom) sein könnte, zu entfernen.
  - Auf Clusterwarzen oder Warzen, die sehr nahe beieinander (unter 3 cm) liegen. Behandeln Sie jeweils nur eine Warze und warten Sie 14 Tage, bevor Sie die folgende Warze behandeln. Ansonsten besteht ein erhöhtes Risiko einer übermäßigen Hautschädigung.
- NACH DER VERWENDUNG VON WARTNER® CRYO FREEZE**
- Die Verwendung von Wartner® Cryo Freeze wird ein prickelndes Gefühl verursachen und die Haut kann schmerzen oder irritiert sein. Machen Sie sich keine Sorgen, diese Wirkungen sollten nach ein paar Stunden verschwinden.
  - Die Haut wird an der Stelle, an der Sie Wartner® verwendet haben, weiß sein. Nach einiger Zeit wird die

Haut wieder ihre normale Farbe bekommen und wird die Warze rot aussehen.

- Innerhalb weniger Minuten bis zu einigen Tagen nach der Vereisung kann dort eine Blase entstehen, manchmal mit Blut gefüllt. Dies ist eine normale Folge der Vereisung und gibt meistens an, dass die Behandlung erfolgreich war. Versuchen Sie nicht, die Blase aufzustechen. Schützen Sie die Blase nötigenfalls mit einem sterilen Verband. Desinfizieren Sie die Blase gut, wenn sie sich öffnet.
- Wenn Sie oder Ihr Kind eine Warze auf der Fußsohle haben, die beim Gehen schmerzhaft ist, bringen Sie ein rundes Hühneraugenpflaster auf dem Gebiet an - dadurch wird es komfortabler.
- Nicht am behandelten Gebiet herumzupfen oder versuchen, die Warze abzureißen.
- Das behandelte Gebiet sauber halten und nötigenfalls desinfizieren. Dies ist wichtig, um eine Superinfektion der behandelten Haut zu vermeiden.
- Baden und duschen ist gestattet.

**Mögliche Nebenwirkungen sind:**

- Blasen rund um das behandelte Gebiet (möglicherweise Blutblasen) - diese werden je nach Fall unterschiedlich sein (siehe Kapitel „Nach der Verwendung von Wartner® Cryo Freeze“);
- Die Haut verliert ihre Farbe - die sogenannte „Depigmentierung“;
- Kleine Brandwunden und Narbenbildung;
- Haut-/Nervenschaden (bei übermäßigem Kontakt);
- Vorübergehende Störung des Gefühls in der Haut (Prickeln, Kribbeln, schmerzhaftes Gefühl).

Jeder ernste Unfall, der sich in Bezug auf dieses Produkt ereignet hat, muss am ConsumerConnect@perrigo.com und der Federalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte, Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brüssel, gemeldet werden. Dies ist wichtig für die fortlaufende Bewertung des Nutzen-Risiko-Verhältnisses dieses Produkts.

### SPRECHEN SIE MIT IHREM ARZT:

- wenn Sie oder Ihr Kind unerwartete Nebenwirkungen bemerken;
  - wenn die Warze nicht abheilt;
  - wenn die Warze nach 3 Behandlungen nicht verschwunden ist (siehe unten).
- Muss ich die Behandlung wiederholen?**
- Wartner® ist sehr effizient - nach nur wenigen Sekunden Anwendung wird der Kern der Warze erreicht und aufgelöst. Durch die natürliche Abschuppung der Haut wird sich die Warze lösen. In den meisten Fällen verschwindet die Warze nach einer Behandlung. Bei alten oder großen Warzen kann mehr als eine Behandlung erforderlich sein, insbesondere bei Fußwarzen.
- Wenn die Warze nach 14 Tagen nicht ganz oder teilweise verschwunden ist, dann wiederholen Sie die Behandlung (Schritte 2, 3 und 4).
  - Bei Warzen an Finger, Fuß oder Zehen, die dicht nebeneinander liegen, müssen Sie jede Warze einzeln behandeln - warten Sie 14 Tage mit der Behandlung der nächsten Warze.
  - Wenn eine Warze nicht nach 3 Behandlungen verschwunden ist, dann sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Vergessen Sie nicht, dass mindestens 14 Tage zwischen den Behandlungen liegen müssen.
- Besuchen Sie für weitere Informationen über die Behandlung von Warzen unsere Website**
- [www.wartner.eu](http://www.wartner.eu)

### B. WIE WIRD WARTNER® CRYO FREEZE AUFBEWAHRT

**Vor der ersten Verwendung:**

- Trocken und kühl (5-25 °C) lagern.
- Nicht im Tiefkühlschrank aufbewahren.
- Keinen Temperaturen über 50 °C aussetzen. Nicht aufbewahren in Autos, Wohnwagen oder an andere

Orte, an denen die Temperatur stark ansteigen kann. Ein Anstieg der Temperatur beschädigt den Stift und schaltet ihn dauerhaft aus.

- Vor Sonne schützen.
- Von Feuer und Hitze fernhalten.

**Nach der ersten Verwendung:**

- Die Kappe wieder auf den Stift aufsetzen und im Kühlschrank aufbewahren - der Stift hat dadurch eine längere Lebensdauer und die Anzahl der brauchbaren Dosierungen erhöht sich. Nicht im Tiefkühlschrank aufbewahren.
- Das Gerät keinen Temperaturen über 35 °C aussetzen, weil ansonsten eine Sicherheitsvorkehrung aktiviert wird, die den Stift dauerhaft ausschaltet.
- Wenn Sie die Plastikteile des Stifts oder den Verschluss reinigen möchten, dann verwenden Sie hierzu ausschließlich ein feuchtes Tuch.

### C. WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR DEN BENUTZER

**Sicherheitsmaßnahmen**

**Nicht länger als 15 Sekunden auf einer dünnen Haut (Hände, Finger, Arme, Zehen, Oberseite und Seite der Füße usw.) anwenden, 40 Sek. auf schwieliger, dicker Haut (Fußsohlen).**

- Nur zur äußeren Anwendung.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die Behandlung von Warzen bei Kindern muss durch einen Erwachsenen erfolgen.
- Nicht einatmen.
- CO<sub>2</sub> ist ein geruchloses, ungiftiges und nicht entflammendes Gas.
- **Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Auch nach der Verwendung nicht durchbohren oder verbrennen** - der Stift steht unter hohem Druck und darf nicht geöffnet werden.

**Verpackung und Verfalldatum**

l'élimination des déchets.

**QUE FAIRE LORSQUE LE STYLO EST VIDE OU CASSÉ?**

- Si vous ne voyez pas de pastille de glace après avoir préparé et activé le stylo (étapes 1 et 2), il n'y a plus de gaz dans le stylo. Utilisez un nouveau stylo.
- S'il y a un bruit continu après que vous avez activé le Wartner® Cryo Freeze et si du gaz s'échappe, le stylo est cassé. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer le stylo vous-même - même si vous pensez qu'il est vide. Rapportez le stylo à la pharmacie.

**La dernière mise à jour de cette notice date de novembre 2019.**

- Die Verpackung enthält eine Wartner® Cryo-Freeze-Verpackung.
- Haltbarkeit im Kühlschrank nach der ersten Anwendung: 2 Monate.
- Den Stift nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.
- Den Stift entsprechend den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften entsorgen.


**WENN DER STIFT LEER ODER ZERBRUCHEN IST:**

- Wenn Sie nach dem Vorbereiten und Aktivieren des Stiftes (Schritt 1 & 2) keine Eistablette sehen, ist das Gas im Stift aufgebraucht. Verwenden Sie einen neuen Stift.
- Wenn nach der Aktivierung des Wartner® Cryo Freeze ein ständiges Zischen ertönt und Gas entweicht, dann ist der Stift defekt. Versuchen Sie, den Stift nicht zu öffnen oder selbst zu reparieren - selbst wenn Sie denken, dass er leer ist. Bringen Sie den Stift zurück in Ihre Apotheke.

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt im November 2019 überarbeitet.**

**Oystershell NV**  
Nijverheidsweg 10  
9820 Meretbeke  
Belgie

**Verdeler/Distributeur/Vertrieb:**  
Omega Pharma Belgium NV, Venecoweg 26,  
9810 Nazareth, Belgie

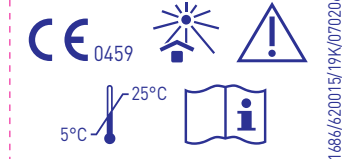

Brand:	Application:	Item code(s):	Market:	Master text version:	Barcode 1 type:	-	Component size (flat):	Cutter guide nr.	Manufacturer:
Wartner	Pen	LF24591A	Belgium	-	Barcode 1 nr:	-	-	-	-
Variant:	Size:	Unit of measurement:	Languages on the component:	Packaging type:	Barcode 2 type:	-	Folded size:	PO nr:	Printer:
Wart&Verruca Cryo	14	ml	dutch-French-German	leaflet	Barcode 2 nr:	-	-	LRO1652	-
		1: Cyan	5: PANTONE Reflex Blue C		Marketing Approval:		Regulatory Approval:		 www.athena-graphics.be
		2: Magenta	6: Cutter guide		Name: .....		Name: .....		
		3: Yellow	7:		Date: .....		Date: .....		
		4: Black	8:		Signature:		Signature:		
Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:	Pass nr:	Pass date:
0	15-01-2020	1	28-01-2020	2	06-04-2020	3	-	4	-
FOR APPROVAL · Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.									